



INNOVATION

**DIVEEN<sup>®</sup>**

PER SENTIRSI NUOVAMENTE LIBERE

# Diveen® è libertà

Milioni di donne in tutto il mondo soffrono di incontinenza urinaria da sforzo e si stima che in Italia ne soffrano più di 2,5-3 milioni.

Le perdite di urina privano dei piccoli piaceri di tutti i giorni come ridere, correre e praticare sport o fare un qualsiasi piccolo sforzo.



## Semplifica la quotidianità.

Diveen® è il primo dispositivo intravaginale indicato per le donne che soffrono, in particolare, di incontinenza da stress o mista.

## Efficacia


Clinicamente provata per la gestione dell'incontinenza urinaria da sforzo femminile<sup>(1)</sup>.

- Diveen® **riduce** l'incidenza delle perdite del **69%**
- Diveen® **migliora** la **qualità di vita** delle utilizzatrici<sup>(1)</sup>, **78 donne su 100** si ritengono **soddisfatte**<sup>(2)</sup>

(1) vs. satisfaction score of 5/100 for patients who did not use Diveen®  
(2) Cornu J.N et al 75NC007 device for non invasive stress urinary incontinence management in women: a randomized controlled trial Int Urogynecol J (2012); 23 (12): 1727.1734

# Diveen® la scelta che rivoluziona

- 💡 Discreto, pratico e semplice da utilizzare
- 💡 Ideato per tutte le donne

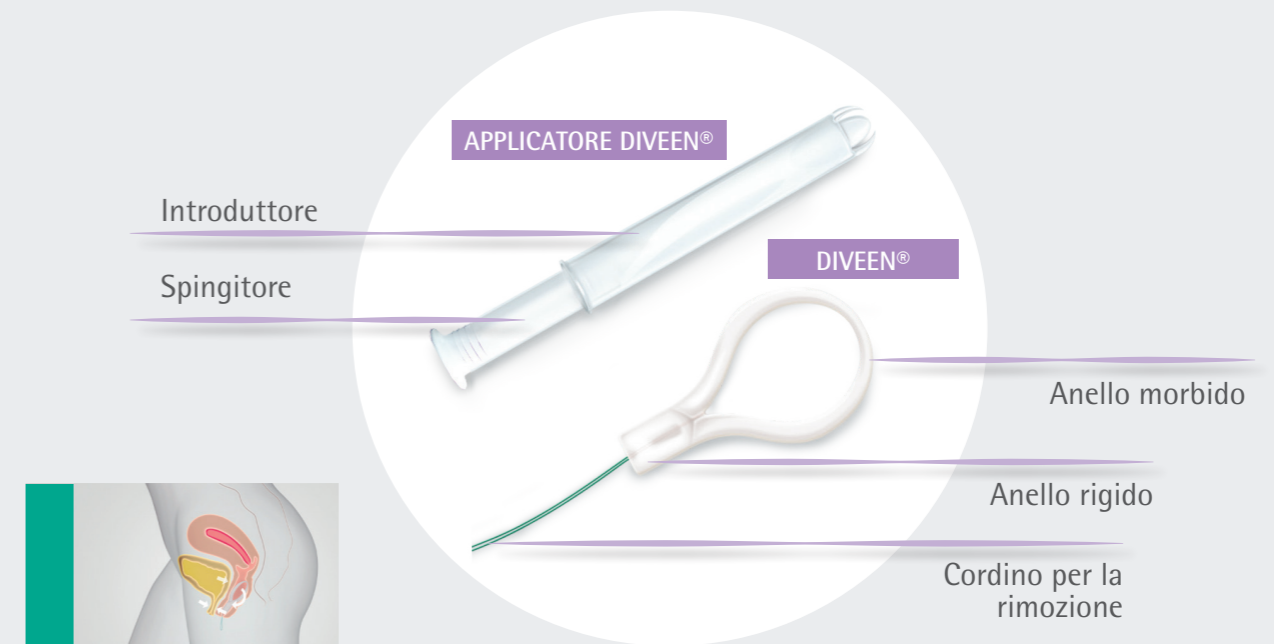

## Concetto brevettato ed innovativo

Diveen® è concepito per sostenere meccanicamente la parete vaginale superiore sotto il collo dell'utero. Durante uno sforzo la pressione intraddominale si trasmette alla vescica, e di conseguenza, all'anello morbido del Diveen®.

Questo, a sua volta, determina uno spostamento verso l'alto della parte rigida che supporta il collo dell'uretra, chiudendolo e riducendo significativamente l'incidenza del rischio di perdita delle urine.




# Perchè utilizzare Diveen®?

- ☀ Meccanismo unico che consente una significativa riduzione del rischio delle perdite di urina
- ☀ Sviluppato con materiale biocompatibile
- ☀ Discrezione garantita al 100%
- ☀ Controllo dell'incontinenza per 12 h, per vivere i momenti della vita in totale serenità
- ☀ Di facile utilizzo, come un tampone vaginale. Non è necessario rimuoverlo durante la giornata e per urinare



## Le donne lo confermano!

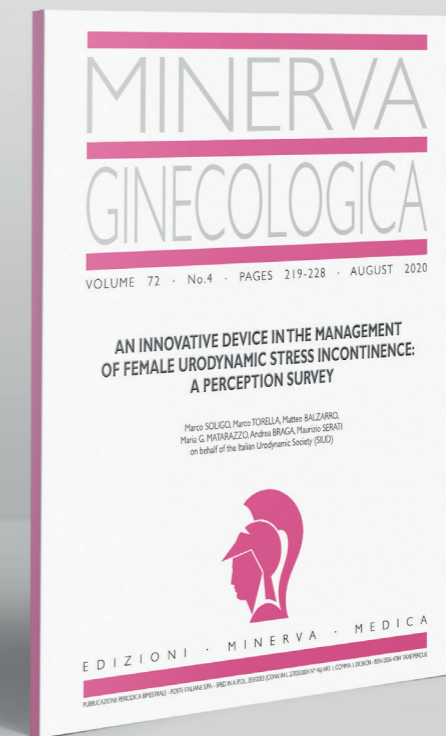

## Obiettivo dello studio

Testare l'efficacia del dispositivo Diveen® nel ridurre le perdite urinarie e la tollerabilità del suo utilizzo in una popolazione di donne italiane.

## Metodo dello studio

Sono state incluse nello studio 74 donne afferenti a 5 Centri Uroginecologici distribuiti su tutto il territorio nazionale con diagnosi urodinamica di Incontinenza Urinaria da Sforzo (IUS) pura o mista.


Sono state escluse dallo studio donne con limitazioni alla destrezza manuale e donne con prolasso clinicamente significativo (segmento prolassante oltre l'imene).

Al termine della valutazione clinica, nell'attesa di iniziare un trattamento specifico per la IUS (riabilitativo o chirurgico), è stata proposta una Survey mediante l'utilizzo del dispositivo Diveen® con un controllo clinico ad un mese di distanza.

67 donne su 74 donne hanno utilizzato il dispositivo e completato la Survey.

# Risultati

Quando l'efficacia incontra la semplicità

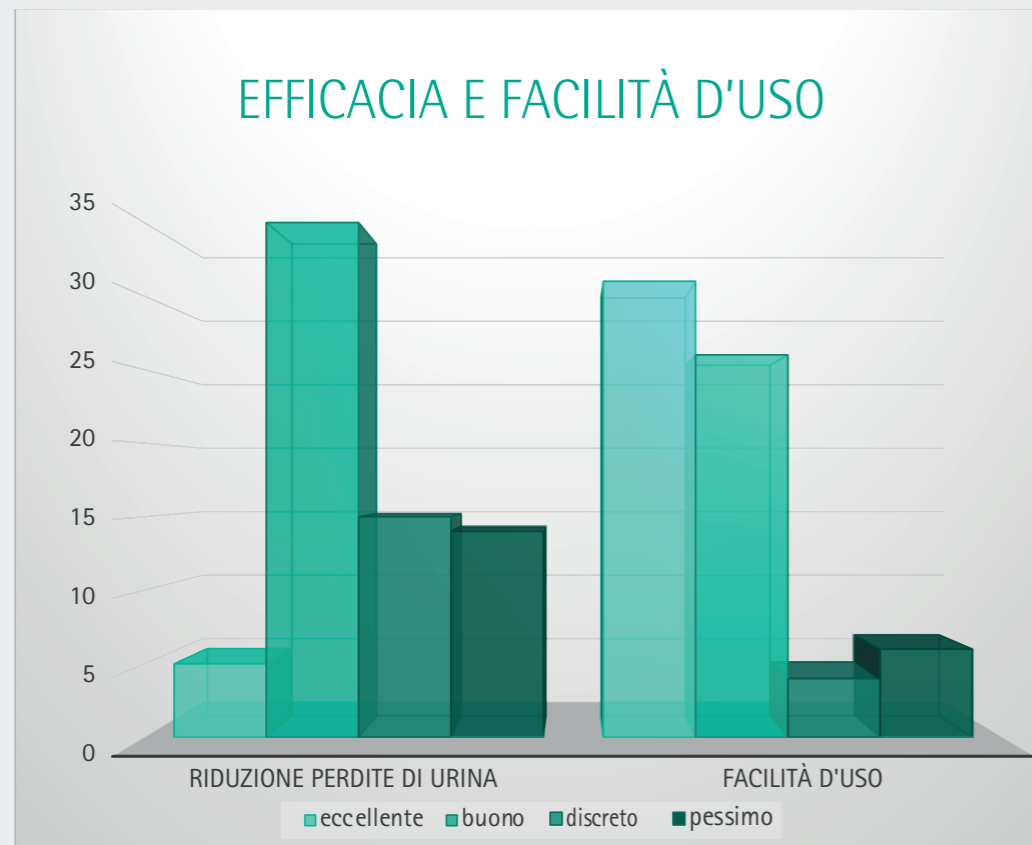

Il **70%** delle donne ha valutato il dispositivo **EFFICACE** nel ridurre le perdite di urina e molto semplice da utilizzare



...e per concludere...



Sulla base della Survey condotta in cinque Centri Italiani, possiamo affermare che il dispositivo Diveen® per il trattamento dell'incontinenza urinaria, si dimostra ben tollerato ed efficace nel ridurre le perdite di urina in una quota superiore alla metà delle donne investigate.

# Più controllo, più Diveen®!



Ref	Misura	Confezionamento
3132F	Small	5 Dispositivi +1 Applicatore
3133F	Medium	5 Dispositivi +1 Applicatore
3022F	Small	15 Dispositivi +1 Applicatore
3023F	Medium	15 Dispositivi +1 Applicatore



Distributore in Italia:

**B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia**

Tel 02 662181 | Fax 02 66218357

[www.bbraun.it](http://www.bbraun.it)